


evolution

EasyWay²

balloon catheter

O balão que facilita o caminho.

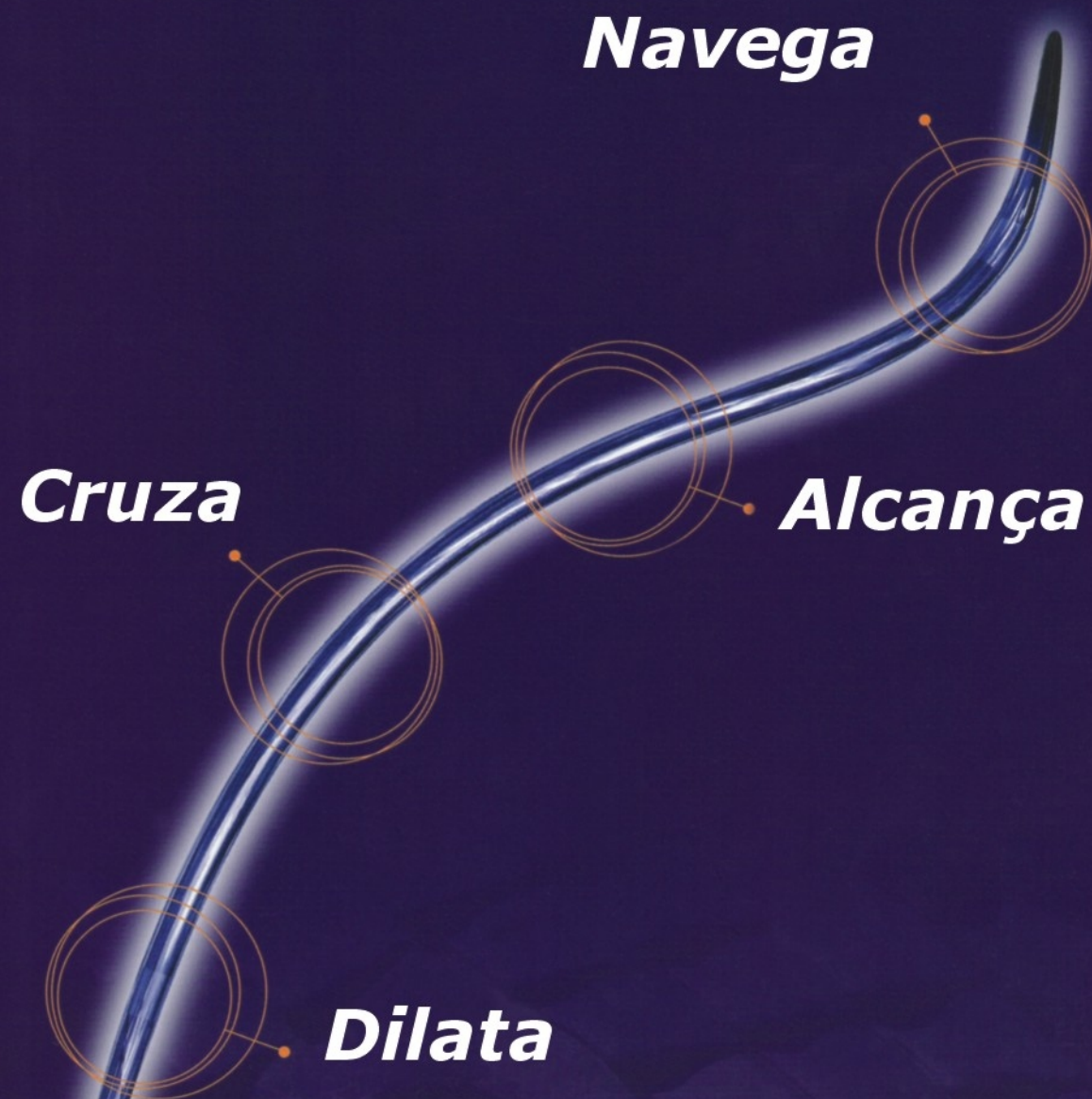

cordyna^m.ic
An IBERHOSPITEX S.A. division

Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	Perfil (Polegadas)	Pressão (atm.)			Referência
			Nominal	Estimada	Média	
1,5	10	0,024	6	16	22	51121
1,5	20	0,024	6	16	22	51122
1,5	30	0,024	6	16	22	51123
2,0	10	0,024	6	16	22	51171
2,0	15	0,024	6	16	22	51174
2,0	20	0,024	6	16	22	51172
2,0	30	0,024	6	16	22	51173
2,5	10	0,024	6	16	22	51221
2,5	15	0,024	6	16	22	51224
2,5	20	0,024	6	16	22	51222
2,5	25	0,024	6	16	22	51225
2,5	30	0,024	6	16	22	51223
2,5	35	0,024	6	16	22	51226
2,5	40	0,024	6	16	22	51227
3,0	10	0,025	6	16	22	51271
3,0	15	0,025	6	16	22	51274
3,0	20	0,025	6	16	22	51272
3,0	25	0,025	6	16	22	51275
3,0	30	0,025	6	16	22	51273
3,0	35	0,025	6	16	22	51276
3,0	40	0,025	6	16	22	51277
3,5	10	0,025	6	16	22	51321
3,5	15	0,025	6	16	22	51324
3,5	20	0,025	6	16	22	51322
3,5	25	0,025	6	16	22	51325
3,5	30	0,025	6	16	22	51323
3,5	40	0,025	6	16	22	51327
4,0	10	0,026	6	16	22	51371
4,0	15	0,026	6	16	22	51374
4,0	20	0,026	6	16	22	51372
4,0	25	0,026	6	16	22	51375
4,0	30	0,026	6	16	22	51373
4,0	40	0,026	6	16	22	51377
4,5	10	0,026	6	16	22	51421
4,5	15	0,026	6	16	22	51424
4,5	20	0,026	6	16	22	51422
4,5	25	0,026	6	16	22	51425
4,5	30	0,026	6	16	22	51423
4,5	40	0,026	6	16	22	51427

Cateter guia recomendado 5F
Guia recomendada 0,014"

FABRICADO POR:



IBERHOSPITEX S.A.

IBERHOSPITEX, S.A.
Avda. Catalunya 4
08185 LLIÇÀ DE VALL (Barcelona) ESPANHA
Tel: +34 93 843 6034
Fax: +34 93 843 6111
E-mail: info@iberhospitex.com
www.cordynamic.com



EN 13485

DISTRIBUÍDO POR:



CURITIBA - (41) 3015.1097
www.cardiosystem.com.br



O balão que facilita o caminho.

EasyWay2
balloon catheter

Cateter balão de troca rápida

Visando encontrar o desenvolvimento contínuo na cardiologia de intervenção, projetamos o EasyWay2, cujas características melhoradas e performance preenchem extensivamente os requerimentos de todas as situações clínicas.

Navega melhor

Ao utilizar materiais ainda mais deslizantes e flexíveis, o cateter navega perfeitamente na anatomia vascular mais tortuosa, e evita fricções com o cateter guia.

Compatibilidade do *kissing balloon* em guias 6F.

Alcança mais

Ao reduzir o balão para otimizar a área de transição, nós obtivemos uma força de transmissão com bastante equilíbrio das partes proximal para a distal que garantem uma constante empurrabilidade ao longo do cateter, para alcançar as lesões distais.

Cruza com excelência

Graças ao balão de perfil extremamente baixo, EasyWay 2 garante a passagem fácil pelas lesões, incluindo as oclusões mais difíceis, graças ao:

- Perfil Cônico 0,017" •
- Dois marcadores radiopacos encravados •
- Camada hidrofílica Hydro-X® •

Dilata eficientemente

O novo material Rullep® de baixa complatência dilata as lesões de modo seguro, reduzindo o risco de dissecação e permitindo tempos mínimos de inflação e deflação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Comprimento total:	140 cm
Comprimento do corpo distal:	25 cm
Diâmetro do corpo proximal:	1,8 F
Diâmetro do corpo distal:	2,6 F
Marcadores radiopacos:	2 encravados
Cobertura hidrofílica:	Hydro-X®
Material do balão:	Rullep®
Cabo guia recomendado:	0,014"
Tempo de deflação:	3-5 sec